

新しいパソコンへの「診るルンのデータ移行」

【最初にお読みください】

2020年1月14日に、日本マイクロソフト株式会社によるWindows 7のサポートが終了します。その結果を踏まえて、下記の手順で「プログラムのインストール」と「診るルンデータフォルダ移行」を行ってください。

【手順1 新しいパソコンの環境設定】

1) 端末のMicrosoft .NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む) を有効にしてください。

Windows 8 / 8.1

[ウィンドウズキーとXキーを同時押し]

[コントロールパネル]

Windows 10

[スタート]

[Windowsシステムツール]


[コントロールパネル]

[プログラム]


[プログラムと機能]

[Windowsの機能の有効化と無効化]


[プログラム]を押下してください。

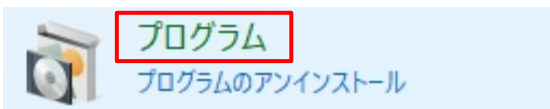

[Windowsの機能の有効化または無効化]を押下してください。

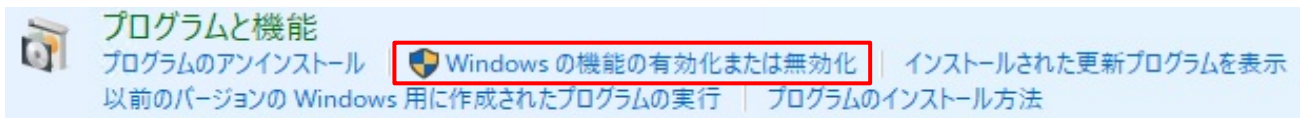


.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む) を「■」にしてください。

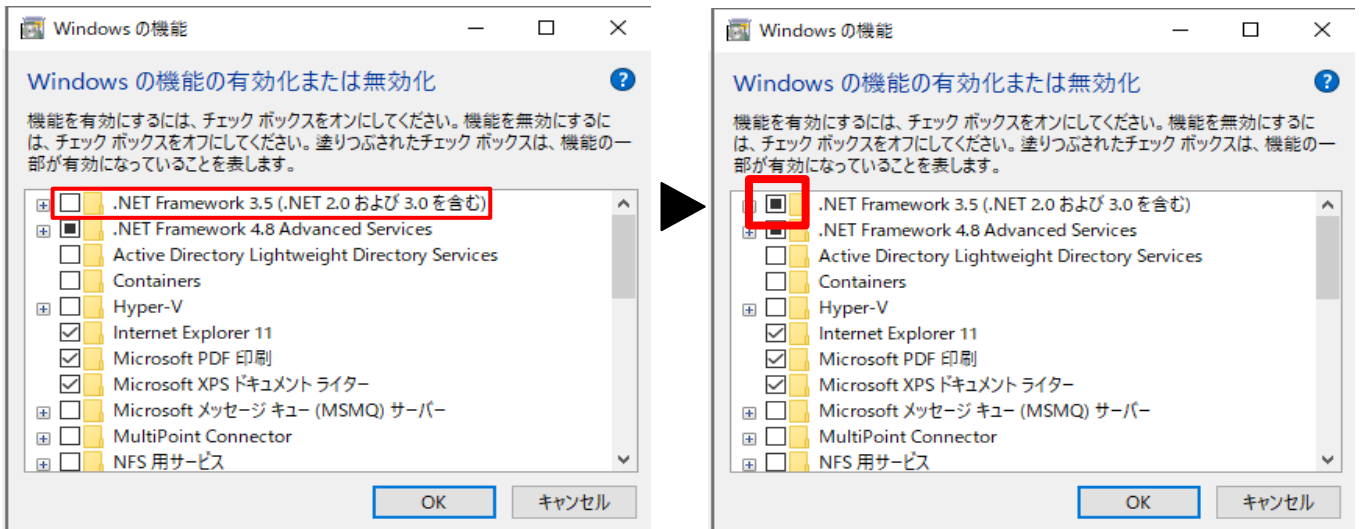

2) 端末のbit数を確認してください。


Excel or Word 2010

[ファイル] → [ヘルプ] → バージョン情報 (32bit / 64bit)

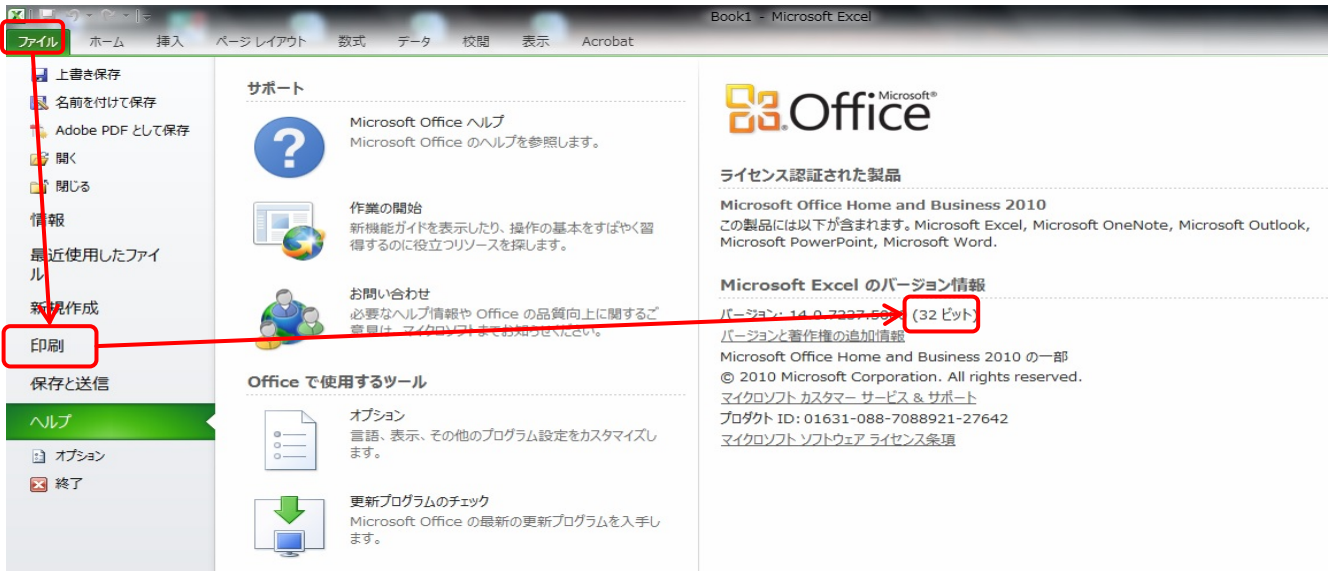

Excel or Word 2013 / 2016 / 2019

[ファイル] → [アカウント] → [Excel / Wordのバージョン情報] → (32bit / 64bit)

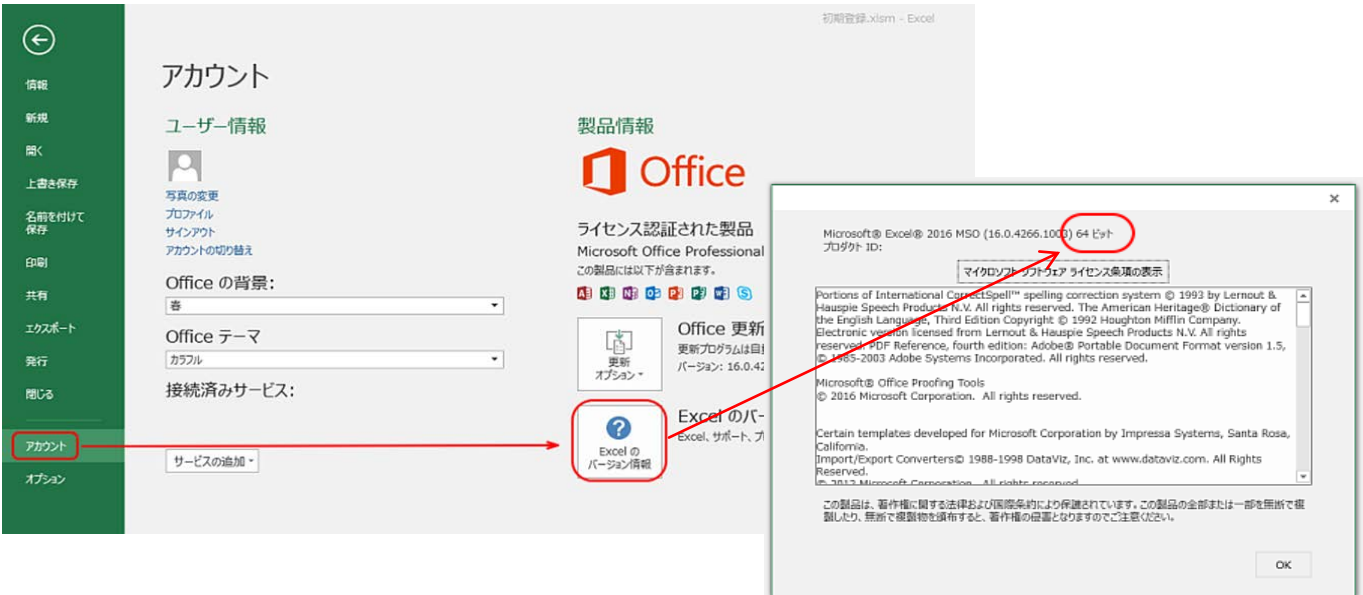


【手順2 プログラムインストール】

1) 診るルンCD又はサポートページからインストールしてください。




- ①動作環境
手順1の2) で確認したbit数
- ②診るルン必須コンポーネント
[Microsoft Access Database Engine]がインストールされます。
- ③Adobe Readerインストール
上位版がインストール済みの可能性があります。
- ④診るルン インストール
インストールを開始します。

[次へ]を押下してください。

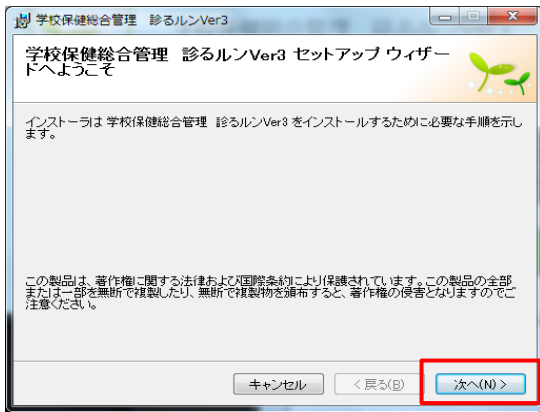


インストール先フォルダの選択画面が表示されます。変更の必要がなければ[次へ]を押下してください。

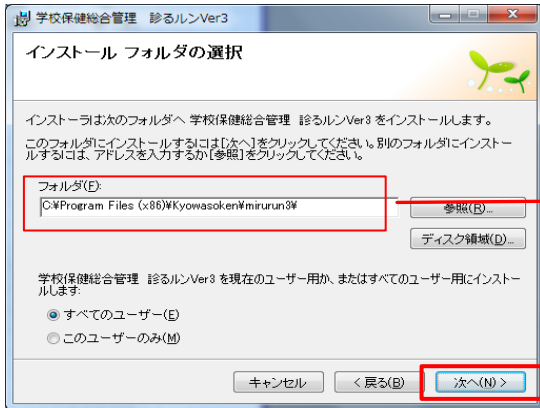


インストール先を記録してください。
バージョンアップ時のインストール場所です。

インストールの確認画面が表示されます。[次へ]を押下してください。インストールが開始されます。

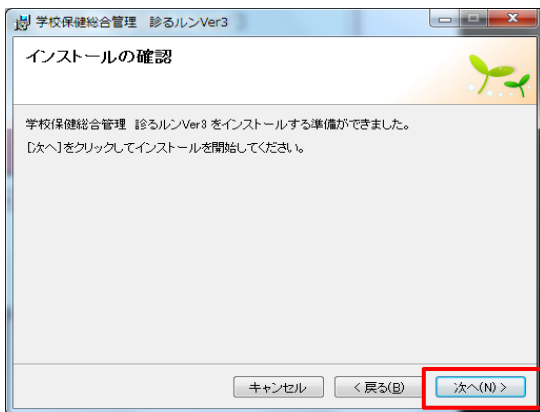


『インストールが完了しました。』とメッセージが表示されたら、画面を閉じてください。

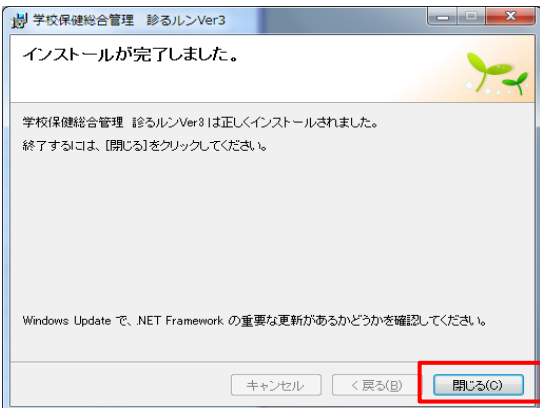

【手順3 診るルンデータフォルダー移行】



1) 使用中のデータフォルダーを移してください

使用中の診るルンを起動させ、最初のページ下方に表示されているフォルダーを新しいパソコンへ移してください。

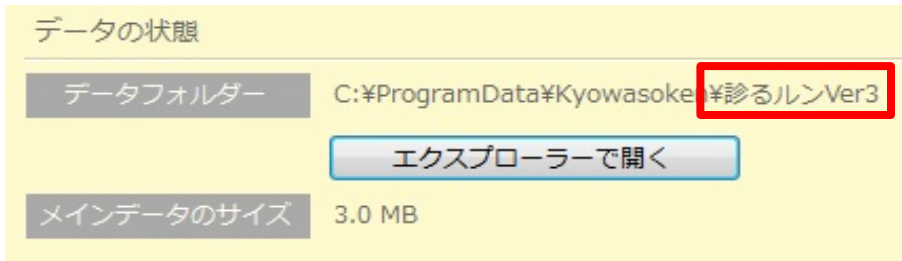

(最後の「¥」の後に表示されているフォルダーです。
(ProgramDataは隠しフォルダーです、ICT担当者様にご相談してください。)

2) 新しいパソコンの診るルンを起動すると下記のメッセージが出ますので、以下の手順で進めて下さい。

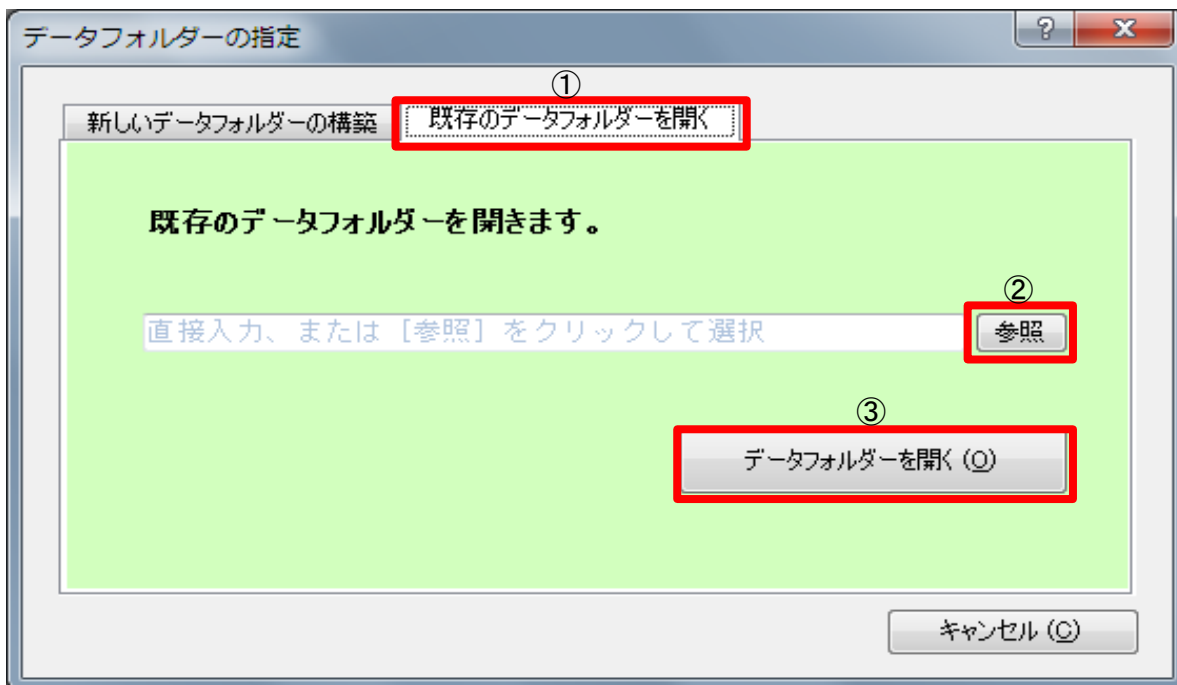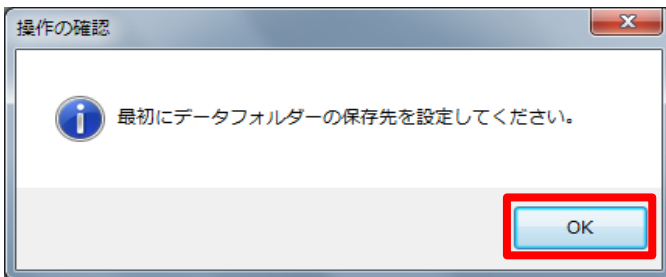

- ① 「既存のデータフォルダーを開く」
- ② 「参照」：手順3の 1) で移動したデータフォルダーを指定してください。
- ③ 「データフォルダーを開く」を押すと、読み込みが開始されます。

以上